

Guide d'utilisation

Monte-escalier DeVi UP — modèles droit et courbe

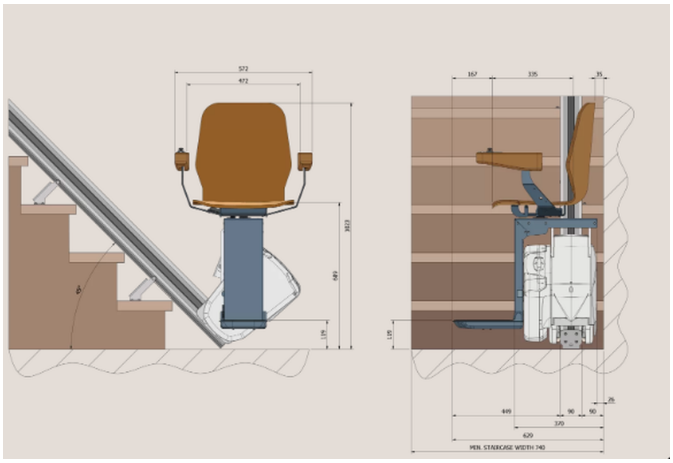

Monte-escalier droit

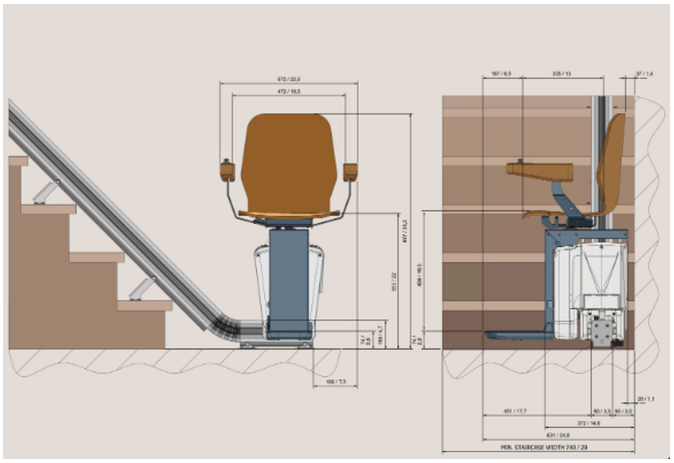

Monte-escalier courbe

Les monte-escaliers DeVi UP droit et courbe s'utilisent de la même façon. Ce guide s'applique donc aux deux modèles.

1. Vos commandes

Commande	À quoi elle sert
Bouton marche / arrêt	Appuyez dessus pour mettre le monte-escalier en marche. Son voyant lumineux indique l'état de l'appareil : s'il clignote, cela signale un problème.
Manette (accoudoir)	Manette ergonomique intégrée à l'accoudoir, utilisable d'une seule main : poussez-la dans la direction souhaitée pour monter ou descendre.
Télécommande d'appel	Permet d'appeler électriquement le siège à l'étage où vous vous trouvez, sans être assis dessus.

Sources : manuel utilisateur DeVi-Stairlifts UP, locamedaccess.ma et upstairlift.com.
Ce guide simplifié ne remplace pas le manuel du fabricant remis lors de l'installation.

2. Monter ou descendre, étape par étape

1. **Appelez le siège si besoin**
   Si le monte-escalier n'est pas à votre étage, faites-le venir avec la télécommande d'appel.
2. **Abaissez le siège et l'accoudoir**
   Dépliez le siège et abaissez l'accoudoir avant de vous installer.
3. **Mettez en marche**
   Appuyez sur le bouton marche / arrêt.
4. **Asseyez-vous et bouclez la ceinture**
   Le monte-escalier ne se déplace pas tant que la ceinture n'est pas attachée.
5. **Placez vos pieds sur le repose-pieds**
   Vos deux pieds doivent reposer entièrement sur le repose-pieds.
6. **Actionnez la manette**
   Poussez la manette dans la direction souhaitée. Le monte-escalier avance à vitesse régulière jusqu'au palier.
7. **Faites pivoter le siège**
   À l'arrivée, poussez la manette une fois de plus : le siège pivote automatiquement vers le palier.
8. **Descendez du siège**
   Détachez la ceinture, posez les pieds au sol, puis levez-vous.
9. **Libérez l'escalier**
   Relevez le siège et les accoudoirs ; le repose-pieds motorisé se replie automatiquement. L'escalier reste ainsi libre pour les autres occupants.

3. Batterie et charge

Situation	Ce qu'il faut savoir
Stationnement	Le monte-escalier doit toujours être garé sur ses contacts de charge. Sinon, un signal sonore retentit et la batterie ne se recharge pas.
Coupure de courant	Le monte-escalier fonctionne sur batterie 24 V rechargeable : il reste utilisable pendant une coupure de courant, et la batterie se recharge automatiquement.
Batterie faible	Après une mauvaise charge ou de nombreux trajets consécutifs, le monte-escalier ne peut plus que descendre. Environ 3 heures de charge suffisent pour qu'il soit à nouveau pleinement opérationnel.

Sources : manuel utilisateur DeVi-Stairlifts UP, locamedaccess.ma et upstairlift.com.
Ce guide simplifié ne remplace pas le manuel du fabricant remis lors de l'installation.

4. Sécurité

Point	À retenir
Charge maximale	125 kg, une seule personne.
Ceinture de sécurité	Obligatoire : sans ceinture bouclée, le monte-escalier ne démarre pas.
Capteurs de sécurité	Ils détectent les obstacles et arrêtent automatiquement le monte-escalier.
Repose-pieds	Gardez les pieds entièrement sur le repose-pieds pendant tout le trajet.
Voyant du bouton marche	Un voyant qui clignote signale un problème : n'utilisez pas l'appareil et contactez Locamed Access.

5. En cas de problème

Situation	Que faire
Le monte-escalier ne démarre pas	Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton marche / arrêt et que la ceinture est bouclée.
Le voyant clignote	Un problème est signalé. Contactez Locamed Access.
Un signal sonore retentit à l'arrêt	Le monte-escalier n'est pas garé sur ses contacts de charge. Ramenez-le en position de charge.
Il descend mais ne monte plus	La batterie est faible. Laissez-le sur ses contacts de charge environ 3 heures.
Il s'arrête pendant le trajet	Un capteur a détecté un obstacle. Vérifiez que rien ne gêne le passage sur l'escalier ou le rail.

6. Entretien

Élément	Comment nettoyer
Fréquence	Nettoyez le monte-escalier régulièrement.
Siège, accoudoirs, repose-pieds	Chiffon humide.
Rail	Chiffon sec.
À éviter	L'excès d'eau et les détergents caustiques.
Maintenance	La maintenance et le service après-vente sont assurés au Maroc par les techniciens certifiés de Locamed Access.

Important : n'essayez jamais de démonter une pièce ni d'intervenir sur le rail vous-même. Pour toute anomalie, contactez Locamed Access · locamedaccess.ma

Sources : manuel utilisateur DeVi-Stairlifts UP, locamedaccess.ma et upstairlift.com.
Ce guide simplifié ne remplace pas le manuel du fabricant remis lors de l'installation.